

snuzza® | PICO 2

SMART WEARABLE MONITOR



Italiano

Manuale

LEGGERE LE ISTRUZIONI PER INTERO PRIMA DELL'USO



PP2MGE001

importante

Il Pico è un aiuto per la cura dei bambini, non un dispositivo medico. Non è destinato alla diagnosi, alla prevenzione o al monitoraggio di una malattia, di una lesione o di un handicap. Il Pico inoltre non è adatto per co-sleeping o condivisione del letto.

SNUZA è un marchio registrato di

 Snuza International (Pty) Ltd

Unità 8-9 Roeland Square

Roeland Street

Città del Capo,

8001 Sudafrica



**Prodotto in Sudafrica
Brevettato**

contenuto


1. Importante: si prega di leggere	1
2. Introduzione	3
3. Precauzioni e controindicazioni	5
4. Identificazione delle parti	6
5. Guida introduttiva (QSG)	8
6. Adattamento e posizionamento del pannolino	9
7. Funzionamento del Pico	10
7.1 Adatta il tuo Pico	10
7.2 Accensione/spegnimento	11
7.3 Pausa	11
7.4 Ricarica	11
7.5 Indicatori	11
7.6 Spia di movimento	12
7.7 Bluetooth Low Energy (BLE)	12
7.8 Indicazioni batteria	13
7.9 Indicazioni di allarme	13
7.10 Indicatori caricabatterie	14
7.11 Abbigliamento	15
8. Avviso sveglia	16
9. Batteria	17
9.1 Indicatore batteria	17
9.2 Durata batteria	17
10. Manutenzione	18

10.1 Smaltimento	18
10.2 Pulizia e conservazione	18
11. Risoluzione dei problemi	19
12. Dichiarazione di non responsabilità	19
13. Garanzia	20
14. Informazioni normative	20
15. Descrizione tecnica	21

1. IMPORTANTE - LEGGI PRIMA dell'uso!

Il Pico è progettato per essere attacco al pannolino del bambino o ai pantaloni pigiama del bambino mentre dorme e monitorerà continuamente il movimento respiratorio, la temperatura della pelle, la posizione del sonno e lo stato del sonno. Se collegato, le informazioni vengono trasmesse in streaming al tuo smartphone tramite la tecnologia BLE (Bluetooth low energy).


Fino a quattro (4) Pico's possono essere collegati a uno smartphone contemporaneamente. Solo uno (1) smartphone può monitorare il tuo bambino.

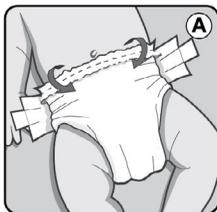

sempre:

Utilizzare il pannolino di dimensioni corrette per assicurarsi che il Pico sia attaccato saldamente.

Per garantire una presa ferma, piegare la parte superiore del pannolino prima di attaccare il Pico. Se necessario, utilizzare gli aggiustatori per pannolino per fornire una vestibilità aderente intorno alla pancia del bambino.

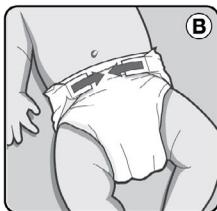


Per fissare il Pico, sollevare la leva superiore e della clip. Far scorrere il Pico sui pantaloncini del bambino o sul pannolino del bambino, posizionando le dita tra la clip e la pelle per garantire che la pelle non venga pizzicata tra la clip e l'abbigliamento/pannolino. La pelle di un bambino è particolarmente elastica

e questo può accadere abbastanza facilmente. Chiudere la leva per fissare il Pico in posizione. Ricontrollare per assicurarsi che nella clip non vengano catturate pelli.

Accendere il Pico premendo brevemente il pulsante di accensione. Tutte le spie lampeggiano e si sentirà un tono di avvio. In alternativa, accendi il Pico premendo il pulsante di accensione nell'app. Il tono di avvio rimarrà silenzioso se controllato tramite

l'app. Immediatamente dopo la sequenza di avvio, la luce della batteria lampeggerà per indicare lo stato di carica della batteria. Se non sei già connesso alla tua app, premi il pulsante "Connetti" nella schermata panoramica dell'app per avviare la connessione al telefono.

Affinché il Pico registri accuratamente la posizione del tuo bambino, vai alla pagina delle impostazioni sull'app e imposta dove il Pico è stato attaccato al pannolino del tuo bambino o ai pantaloni pigiama del bambino. A seconda della posizione di sonno del tuo bambino, puoi anche posizionare il Pico sul lato sinistro o destro. Assicurati che il Pico sia stato attaccato direttamente ai pantaloni o al pannolino.

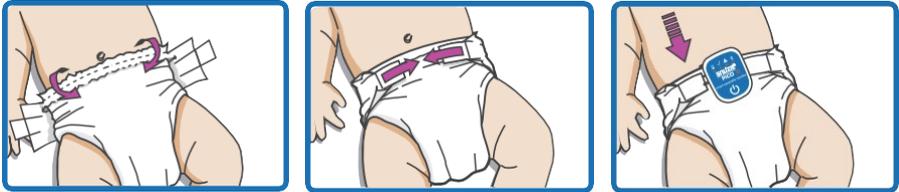

Seguire sempre la procedura di cui sopra per garantire che il movimento respiratorio del bambino venga monitorato.

nota:

Maneggiare sempre il Pico con cura per evitare danni alla clip. Durante il viaggio, conservarlo sempre all'interno della base di ricarica. Per evitare falsi allarmi, metti sempre in pausa il tuo Pico durante l'allattamento al seno, quando cambi il pannolino del tuo bambino o tieni il tuo bambino tra le braccia.

2. INTRODUZIONE



Usò previsto:

Il Pico è un monitor portatile per il movimento di respirazione del bambino che
Pico 2 è un monitor portatile per la respirazione del bambino che monitora comodamente i movimenti respiratori del bambino mentre dorme.

Utente previsto:

Questa apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata dal caregiver del bambino. Il caregiver deve avere una buona comprensione delle istruzioni e delle misure di sicurezza all'interno del manuale d'uso. Si prega di familiarizzare con le istruzioni e condividere con chiunque si prende cura del proprio bambino.

Ambiente d'uso:

Sicurezza domestica:

Il Pico monitora in modo sicuro e conveniente il movimento respiratorio del tuo bambino mentre dorme per fornire un'opportunità di intervento precoce quando viene rilevato un movimento respiratorio irregolare.

Il Pico deve essere agganciato al pannolino (pannolino) o ai pantaloni pigiama del bambino. Non sono necessari cavi, fili, pad per sensori o alimentazione esterna. Il Pico non è adatto per co-sleeping o condivisione del letto.

Il Pico rileva anche il minimo movimento respiratorio e ti avviserà se il movimento respiratorio del tuo bambino si ferma per un periodo di 20 secondi. Il Pico vibrerà per la prima volta delicatamente dopo 15 secondi nel tentativo di risvegliare il bambino.

Se la vibrazione riesce a risvegliare il bambino e la respirazione viene rilevata dopo un tale evento, il Pico continuerà a monitorare il movimento respiratorio. Dopo tre eventi di vibrazione/ eccitazione, l'avviso Rouse ti avviserà del fatto che i movimenti respiratori del tuo bambino si sono fermati per 15 secondi in tre occasioni.

L'avviso di eccitazione è caratterizzato da un breve segnale acustico e lampeggiante della spia di movimento rossa (1) ogni 2 secondi. Il monitoraggio continuerà quando l'avviso sveglia è attivo, ma richiederà al caregiver di occuparsi del bambino per indagare. L'allarme sveglia può essere ripristinato spegnendo brevemente il dispositivo e riaccendendolo. La funzione di avviso di ripetizione può essere disabilitata utilizzando l'applicazione.

Il Pico misurerà anche la posizione in cui si trova il tuo bambino e la temperatura della pelle del tuo bambino.

3. PRECAUZIONI E CONTROINDICAZIONI

- Questo dispositivo non ha lo scopo di prevenire o monitorare una malattia o una condizione come apnea ostruttiva .
- Il movimento da fonti esterne come essere spinto in una carrozzina o viaggiare su un veicolo o un aereo può essere rilevato dal sensore di Pico. Il Pico non dovrebbe essere usato dove sono presenti fonti esterne di movimento.
- Il bambino monitorato deve dormire nel proprio letto separato in quanto il monitor può rilevare il movimento respiratorio di qualsiasi altra persona che condivide il letto con il bambino e non si allarma finché rileva il movimento.
- Trasmittitori radio come telefoni cellulari, baby monitor audio e video, telefoni cordless, walkie-talkie, router wireless, ecc. possono causare interferenze con la capacità del monitor di rilevare il movimento. Il monitor non deve essere posizionato entro 2 metri da altri dispositivi trasmettenti o cavi elettrici.
- Non è consentita alcuna modifica di questo dispositivo.
- Un singolo dispositivo deve essere dedicato all'uso con un solo bambino.
- Nell'improbabile caso in cui piccole parti si staccano dal Pico, ciò può comportare un rischio di soffocamento.
- Piccole parti che si sono staccate per qualche improbabile motivo possono causare un rischio di soffocamento.
- Nel caso in cui il bambino sviluppi un sensibilità cutanea in cui il dispositivo entra in contatto con la propria pelle, fare riferimento alla sezione 7.11 del manuale. Se la sensibilità cutanea persiste, contattaci al support@snuza.com.
- Tenere fuori dalla portata di animali domestici, parassiti e altri bambini in quanto i danni al dispositivo potrebbero causare malfunzionamenti.
- Non inserire nulla nei fori di emissione sonora (5). Non inserire nulla nei fori di emissione sonora (5).
- Non permettere a nessun liquido di entrare nei fori di emissione sonora.

- Non usate forza indebita per piegare/aprire/chiudere la clip (11).



- 12 - Cavo di ricarica
- 13 -potenza Indicatore
- Leggero 14 - base di ricarica

5. GUIDA INTRODUTTIVA

Passo 1: Carica il tuo Pico

Collegare il cavo di alimentazione alla base di ricarica. Assicurarsi che il Pico sia posizionato sulla base di ricarica e chiudere il coperchio della custodia. Lascia il tuo Pico a ricaricarsi per 1 ora.

Passaggio 2: Scaricare l'app Snuzza

Connect Snuzza Connect è disponibile su iOS e Android.

i requisiti minimi dello smartphone:

- Deve supportare: Bluetooth 4.0
- Dispositivi Apple: iOS 8.0 o versione successiva
- Dispositivi Android: Android 5.0 o versione successiva

Passo 3: Registra il tuo Pico

Vai a connect.snuzza.com. Selezionare l'opzione registra nuova appartenenza e completare i campi richiesti.

Un'e-mail di conferma verrà inviata all'indirizzo e-mail selezionato. Una volta confermato, sarai portato al portale Snuzza. Passare alla scheda 'Registrazione dispositivo' del menu.

Immettere il numero di serie del dispositivo e completare i campi di dettaglio richiesti. Il numero di serie si trova sul lato del Pico, o sul lato della confezione Pico.

Passaggio 4: Attaccare il pico

Piegare il bordo superiore del pannolino. Solleva la clip per rilasciare e posiziona il Pico sul pannolino del tuo bambino. Assicurarsi che la clip sia chiusa correttamente una volta posizionata.

Passaggio 5: Attivare il monitoraggio Pico & Start

Accendere il Pico premendo il pulsante di accensione verso il basso fino a quando non viene sentito il tono di avvio e tutte le spie lampeggiano contemporaneamente. Immediatamente dopo la sequenza di avvio, la luce della batteria lampeggerà in verde per indicare che la batteria è completamente carica. Sincronizza il tuo smartphone con il Pico semplicemente premendo l'icona di aggiornamento sullo schermo dell'app. dal tuo smartphone.

Funzioni pico di base

La spia di movimento respiratorio lampeggia in verde su ogni movimento. Se non viene rilevato alcun movimento per 15 secondi, il pico vibrerà per risvegliare il tuo bambino. Se non viene rilevato alcun movimento per altri 5 secondi, il pico suonerà un allarme acustico.

Funzioni di base dell'app

L'app Snuzza Connect è progettata per fornire informazioni sulla frequenza respiratoria del bambino, sulla posizione del corpo, sulla temperatura della pelle, sul rilevamento delle cadute, sui livelli della batteria e avvisarti se la clip del Pico è aperta. Personalizza le impostazioni di avviso in base alle tue preferenze nell'App.

Gli avvisi sull'App possono essere respinti scorrendoli da sinistra a destra. Ciò esclude la frequenza respiratoria e il rilevamento delle cadute. Questi possono essere respinti solo premendo il pulsante di accensione sul dispositivo. Assicurati che il tuo smartphone sia collegato all'app per ricevere tutte le notifiche e gli avvisi.

6. ADATTAMENTO E POSIZIONAMENTO DEL PANNOLINO

Una corretta vestibilità del pannolino è essenziale per il funzionamento del Pico. Il sottile lembo di materiale nella parte superiore del pannolino deve essere piegato sopra la parte più spessa prima che il pannolino sia chiuso (questa è la sezione a cui verrà attaccato il Pico). Il pannolino dovrebbe adattarsi perfettamente al tuo bambino con la parte superiore del pannolino appena sotto l'ombelico. Se il tuo bambino dorme di lato, il Pico deve essere posizionato sul lato sinistro o destro dell'ombelico del bambino.

- L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda ai bambini di dormire sulla schiena. Posizionare il Pico vicino al centro della pancia del bambino (1)
- Se il tuo bambino preferisce dormire sul suo lato sinistro, attacca il tuo Pico in posizione 4 o 2.
- Se il tuo bambino preferisce dormire sul suo lato destro, attacca il tuo Pico in posizione 5 o 3.

•

- Se il tuo bambino preferisce dormire sulla pancia, attacca il tuo Pico vicino alla posizione 4 o 5.



7. Utilizzo

7.1 Attaccail tuo Pico

Quando si attacca il Pico si dovrebbero mettere le dita tra il pannolino del bambino e la pelle del bambino. Assicurarsi che il monitor sia agganciato saldamente al pannolino e lontano dalla pelle del bambino quando si aggancia per non danneggiare il bambino.



Agganciare il Pico al pannolino fino all'intera estensione della clip. Per fissare sollevare la leva anteriore per rilasciare la clip. Posizionare la clip sul pannolino piegato fino all'intera estensione della clip. Chiudere la clip e fare clic sulla leva di bloccaggio chiusa come mostrato:

Assicurati che il Pico sia vicino alla pancia del bambino intorno all'area dell'ombelico, anche se più vicino ai lati può adattarsi a diverse posizioni di sonno. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda che i bambini siano messi a dormire sulla schiena, a meno che non sia consigliato diversamente da un medico. <http://www.who.int/en/>

- Posto sulla pancia per chi dorme sulla schiena
- Posto sul lato della pancia per chi dorme di lato

Pico ha un allarme che identifica se il morsetto viene aperto durante l'uso. Prima si accenderà l'allarme con un lento bip per 7 secondi. Se il morsetto resta aperto per altri 3 Secondi si attiverà l'allarme.

fig. 1

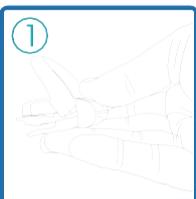


fig. 2



fig. 3



7.2 Accensione/spegnimento

Il Pico può essere acceso premendo brevemente il pulsante di accensione (6) e può essere spento premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione (6) per 2 secondi. I corrispondenti toni di avvio e spegnimento si attiveranno (fare riferimento al punto 7.5)

In alternativa, il Pico può anche essere acceso e spento direttamente dall'app (se è stato abilitato nelle impostazioni dell'app). Ciò ti consente la comodità di accenderlo se hai dimenticato quando l'hai attaccato al pannolino, senza disturbare il tuo bambino.

7.3 pausa

Il Pico è stato progettato per monitorare il movimento respiratorio del bambino, la temperatura della pelle e la posizione del corpo durante il sonno. Tuttavia, per evitare falsi allarmi mentre il bambino non dorme (ad esempio durante l'allattamento al seno, cambiando il pannolino del bambino, il tempo della pancia, ecc.), la funzione "Pausa" ti consentirà di sospendere temporaneamente il monitoraggio per un tempo configurabile dall'utente (sull'app) mentre, ad esempio, l'allattamento al seno o il pannolino cambiano. La funzione di pausa può essere attivata direttamente dall'app toccando il pulsante di pausa.

7.4 caricamento

La base di ricarica del Pico (12) è un caricabatterie di potenza unico che ricarica la batteria integrata semplicemente posizionando il Pico sulla base di ricarica.

7.5 Indicatori di luce - Sequenze di avvio e spegnimento

Avvio tramite pulsante di accensione: Quando il Pico viene acceso utilizzando il pulsante di accensione (6), le spie luminose (1,2,3,4) lampeggiano in una sequenza da sinistra a destra, seguite da un tono di avvio. Immediatamente dopo il tono di avvio, la spia della batteria (1) lampeggia per indicare lo stato della batteria quando è acceso. L'indicazione della batteria ha il seguente significato:

	verde	Batteria buona
	giallo	La batteria è scarica ma dovrebbe durare altre ore
	rosso	La batteria è troppo scarica per il funzionamento e il Pico si è spento automaticamente. Si prega di caricare immediatamente.

Avvio tramite l'app:

Quando il Pico viene acceso utilizzando l'app, non viene riprodotto alcun tono udibile, ma si verificherà la solita sequenza di flash luminoso dell'indicatore di avvio. Le informazioni sulla batteria vengono visualizzate sul cruscotto dell'app, quindi non è necessario osservare il LED della batteria durante l'avvio remoto.

Spegni usando il pulsante - Quando il Pico è spento utilizzando il pulsante, le spie lampeggiano in una sequenza da destra a sinistra, seguite da un tono di spegnimento.

Spegni usando l'app - Quando il Pico è spento utilizzando l'app, non viene sentito alcun tono acustico, ma si verifica la solita sequenza di flash luminoso dell'indicatore di arresto.

7.6 Spia di movimento

La spia di movimento (2) lampeggia quando viene rilevato il movimento.

	verde	Segnale di respirazione forte rilevato
	giallo	Rilevato segnale di respirazione debole
	rosso	Rilevato segnale respiratorio molto debole

7.7 Bluetooth a bassa energia

	blu	Lampeggia in blu ogni 2 secondi se collegato al tuo smartphone / tablet
	rosa	Lampeggia in blu ogni 2 secondi se collegato al tuo smartphone / tablet

	Lampeggiante rosa	Lampeggia rosa 6 volte immediatamente dopo l'avvio per indicare che c'è una notifica importante per te sul server che richiede la tua attenzione. Visualizza questo importante messaggio accedendo al tuo account sul portale Snuza Connect (connettiti.snuza.com).
--	----------------------	---

7.8 Indicazioni sulla batteria

All'avvio:

Come spiegato sopra nella sezione "Sequenze di avvio e spegnimento"

Quando il livello della batteria è basso (mentre il Pico è in carica):

La spia della batteria lampeggia in rosso ogni 5 secondi e suona due volte ogni 60 secondi

Quando il livello della batteria è critico (mentre il Pico è in attività):

La spia della batteria lampeggia in rosso ogni 5 secondi e suona due volte ogni 10 secondi.

Durante la ricarica:

Durante la ricarica, la spia della batteria lampeggia in verde.

Al termine della ricarica, la spia della batteria sul Pico rimarrà di colore verde costante.

7.9 Avvisi e allarmi

Nota: il caregiver deve immediatamente occuparsi del bambino se suona l'allarme. Puoi personalizzare le impostazioni di avviso modificando le impostazioni nell'app. Il Pico allarmerà su tutti gli eventi critici indipendentemente dal fatto che il tuo Pico sia collegato o meno all'app. Il telefono suonerà solo quando è collegato al Pico via Bluetooth.

Vibrazione risveglia:

Se non viene rilevato alcun movimento respiratorio per 15 secondi, il Pico vibrerà delicatamente per risvegliare il bambino.

Allarme movimento respirazione:

Se non viene rilevato alcun movimento respiratorio per 20 secondi, il Pico suonerà un allarme mentre il movimento respiratorio Indicator Light lampeggia simultaneamente.

Allarme velocità movimento respirazione:

Questo allarme può essere configurato nell'app e verrà attivato quando la frequenza di movimento della respirazione scende al di sotto o supera le soglie impostate. Questo avviso si presenta solo sul smartphone e suonerà solo se collegato al Pico tramite Bluetooth.

Temperatura della pelle:

L'app può essere configurata per allarmarsi quando la temperatura della pelle scende al di sotto o supera le soglie impostate. Questo avviso si presenta solo sullo smartphone e suonerà solo se collegato al Pico tramite Bluetooth.

Posizione del corpo:

Questo allarme può essere impostato nell'app per avvisarti quando il tuo bambino si sposta in una posizione specifica del corpo come accendere la pancia che non è raccomandata come parte di tecniche di sonno sicure. Questo avviso si presenta solo sullo smartphone e suonerà solo se collegato al Pico tramite Bluetooth.

Clip Open:

Nel caso in cui la clip si apra accidentalmente, un segnale acustico di avvertimento suonerà per 10 secondi seguito da una vibrazione di avviso e da una successione di 3 suoni di allarme di segnale acustico continuamente. Anche la spia di avvertimento lampeggerà.

Avviso di caduta:

L'attivazione di questa funzione farà sì che lo smartphone ti avviserà se viene rilevata una caduta sul Pico. Questo avviso si presenta sempre sul Pico ma anche sullo smartphone se collegato tramite Bluetooth.

Volume del telefono basso:

Quando il volume del telefono è impostato su un valore troppo basso, una notifica in-app ti avviserà. Si prega di alzare il suono per assicurarsi di poter ascoltare tutte le notifiche. È possibile impostare allarmi a bassa e alta temperatura, frequenza respiratoria e posizione del corpo.

7.10 Indicatori caricabatterie

Quando l'alimentazione è collegata al caricabatterie, la spia di alimentazione (14) sul caricabatterie si illuminerà. La spia di potenza (14) sul caricabatterie non cambia quando il Pico viene caricato o meno. Indica solo se l'alimentazione viene applicata al caricabatterie. Per determinare se il Pico si sta caricando quando si trova sulla base di ricarica, fare riferimento alla sezione precedente.

7.11 abbigliamento

Il Pico può essere agganciato alla cintura piegata del pannolino o alla cintura dei pantaloni elastici. Non è consigliabile avere vestiti tra il Pico e la pelle.

Il Pico può essere utilizzato sotto l'abbigliamento, ma non oltre. Troppi indumenti possono attenuare o attutire l'allarme. Assicurati che l'allarme possa essere sentito se il bambino è coperto di vestiti e / o coperte.

8. AVVISO SVEGLIA

Nota: se lo smartphone è collegato, tutti gli avvisi e gli allarmi, così come tutti i dati in tempo reale sono visibili sull'app. Durante il monitoraggio, se non viene rilevato alcun movimento respiratorio per 15 secondi, il Pico vibra delicatamente nel tentativo di risvegliare il bambino.

Se il movimento respiratorio riprende entro i prossimi 5 secondi, la spia di movimento (2) lampeggia in rosso su ogni successivo movimento respiratorio come indicazione che c'è stato un evento di nessun movimento respiratorio per 15 secondi. Con l'avviso di eccitazione abilitato, dopo 3 tali vibrazioni e incidenti di eccitazione riusciti, la spia di movimento (2) lampeggia in rosso ogni 2 secondi con un segnale acustico simultaneo.

Questo ti avvisa del fatto che il tuo bambino ha smesso di muoversi per 15 secondi in tre occasioni e ha quindi ripreso a respirare il movimento dopo che il Pico ha vibrato. Nota:- Il monitoraggio continuerà mentre l'avviso di eccitazione suona. L'avviso Rouse viene attivato automaticamente ogni volta che il Pico viene acceso.

9. batteria

9.1 Indicatore batteria

Se la batteria si scarica durante il monitoraggio, la spia della batteria (1) lampeggia come segue:

La spia della batteria (1) lampeggia in rosso ogni 5 secondi e suonerà due volte ogni 60 secondi. Quando la batteria diventa critica, la spia della batteria lampeggia in rosso ogni 5 secondi e suona ogni due volte ogni 10 secondi. Caricare la batteria prima di utilizzarla ulteriormente (vedere la sezione 10.3 Ricaricare la batteria) Il segnale acustico può essere silenziato premendo una volta il pulsante di accensione/modalità.

9.2 Durata della batteria

Il Pico ha una batteria ricaricabile e dura circa due settimane con una sola carica. La durata della batteria dipende tuttavia dall'utilizzo.

La custodia del Pico è un caricabatterie di potenza unico che ricarica la batteria integrata semplicemente posizionando il tuo Pico nella custodia.

10. manutenzione

10.1 disposizione:

Il dispositivo e il materiale di imballaggio devono essere smaltiti in conformità con le leggi del tuo paese che regolano lo smaltimento e il riciclaggio delle batterie:

10.2 Pulizia e stoccaggio:

- Pulire delicatamente con un panno umido per rimuovere lo sporco. Un sapone delicato può essere usato per lo sporco ostinato.
- Non utilizzare altri detergenti in quanto potrebbero contenere sostanze chimiche dannose.
- Il Pico è resistente agli spruzzi, non impermeabile. Non immergerti nell'acqua. Se si bagna, asciugarlo immediatamente.
- Durante il trasporto, tieni il tuo Pico nella sua custodia protettiva. Non conservare il pico nella custodia di ricarica per periodi prolungati o conservarlo in un'area umida.

Per prolungare la durata della batteria:

- Ricaricare completamente prima di conservare il Pico per lunghi periodi.
- Non lasciare che il Pico si scarichi completamente e rimanga scaricato per lunghi periodi di tempo.

11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

11.1 Raccordo errato

Controlla l'adattamento e il posizionamento errato del Pico sul pannolino del bambino (vedi Sezione 6 Pannolino / Pannolino Fitment e Sezione 7.1 Montaggio della tua Snuza The Pico).

11.2 Guasto alla batteria

La spia della batteria (1) mostrerà
Si prega www.snuza.com per ulteriori informazioni.

12. Declinazione responsabilità

I clienti utilizzano questo monitor a proprio rischio e pericolo. Snuza International (Pty) Ltd, i suoi membri, dipendenti, agenti, appaltatori, rappresentanti, produttori, distributori e associativi (SNUZA) non saranno ritenuti responsabili per eventuali perdite, danni o lesioni subiti dal cliente o da qualsiasi altra persona derivante o in relazione all'uso o al produttore del monitor, comprese le perdite, i danni o le lesioni subiti dal cliente o da qualsiasi altra persona a causa di eventuali difetti rispetto al monitor, e tutte le garanzie, e qualsiasi altra responsabilità derivante da qualsiasi causa derivante, sono esclusi. Il cliente indennizza Snuza International (Pty) Ltd in relazione a tale responsabilità.

13.garanzia

Snuza International (Pty) Ltd garantisce che questo prodotto sia esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto originale, verificato da una ricevuta di vendita. La nostra responsabilità di garanzia si limiterà a sostituire l'unità gratuitamente e non include i costi di trasporto. La nostra garanzia si estende a tutti i paesi in cui questo prodotto viene fornito. Con l'atto di gestire questo prodotto, l'utente si assume tutte le responsabilità risultanti. Ci riserviamo il diritto di modificare le disposizioni di questa garanzia in qualsiasi momento senza preavviso. Questa garanzia non copre la batteria, l'applicazione errata, la manomissione, l'uso improprio o i danni al trasporto.

14.INFORMAZIONI NORMATIVE

Dichiarazione di conformità FCC per il Pico e la base di ricarica.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. L'operazione è subordinata alle due condizioni seguenti:

- (1) Questa periferica potrebbe non causare interferenze dannose
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare il funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo soddisfa i requisiti FCC per l'esposizione rf in ambienti pubblici o incontrollati.

Dichiarazione normativa canadese per il Pico e la culla di ricarica.

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada.

L'operazione è subordinata alle due condizioni seguenti:

- (1) Questa periferica potrebbe non causare interferenze
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare il funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme all'RSS di Industry Canada applicabile agli apparecchi radio esenti da licenza. Lo sfruttamento è consentito alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non deve produrre interferenze.
- (2) l'utente del dispositivo deve **accettare** qualsiasi interferenza radio subita, anche se l'interferenza rischia di comprometterne il funzionamento. CAN ICES-3 (B)/ICES-3(B)

Questo dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza per l'esposizione rf in conformità con RSS-102 Issue 5 per le condizioni di utilizzo portatili. Questo dispositivo è conforme alle normative e ai requisiti in materia di radiofrequenza in conformità con RSS-102 5th Edition per le condizioni di utilizzo portatili

15.DESCRIZIONE TECNICA

	Parte applicata type BF
	Marcatura CE secondo CE 5/1999/CE, 95/2001/CE, 336/89/CEE (TV Renania)
	Marcatura FCC secondo Federal Communications Commission - USA
IP52	IP52 L'involucro del monitor è protetto dall'ingresso di acqua gocciolante
IC: 21736-01	Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esentida licenza del Canada del settore
IP52	IP52 L'involucro del monitor è protetto dall'ingresso di acqua gocciolante
	Numero di serie del dispositivo (i primi due numeri indicano l'anno di produzione)
	Vedi la sezione Smaltimento per il corretto smaltimento del monitor
Durata tipica:	Snuza The Pico ha una durata prevista di 5 anni dalla data di produzione.

Condizioni ambientali:	Condizioni operative ambientali ammissibili: <ul style="list-style-type: none">· Temperature: da 5 °C a 40 °C.· Umidità: da %15 a %93, non condensa,· Pressione dell'aria: 700HPA TO 1060 HPA
Condizioni ambientali ammissibili di trasporto e stoccaggio dopo aver rimosso il dispositivo dal suo imballaggio protettivo e successivamente tra gli usi:	<ul style="list-style-type: none">· 25 °C senza controllo relativo dell'umidità; e· °70+C con umidità relativa fino a %93, non condensa;
Fonte di alimentazione:	Alimentato internamente Specifiche della batteria: Polimero di litio
Livello di pressione sonora:	85dBm a 10cm

snuza[®]

Contattaci:

Per assistenza nell'utilizzo o nella manutenzione di Snuza The Pico o per segnalare operazioni o eventi imprevisti, contattaci tramite:

sito web:

www.snuza.com/contact

E-mail:

support@snuza.com

telefono:

+27 (0)21 461 8530

Indirizzo fisico:

Unità 8 - 9 Roeland
Square, Roeland Street,
Città del Capo
8001,
Sudafrica